


UTILIZZO DEL MATERASSINO IN POCCHI PASSI




Inserire il cavo di alimentazione

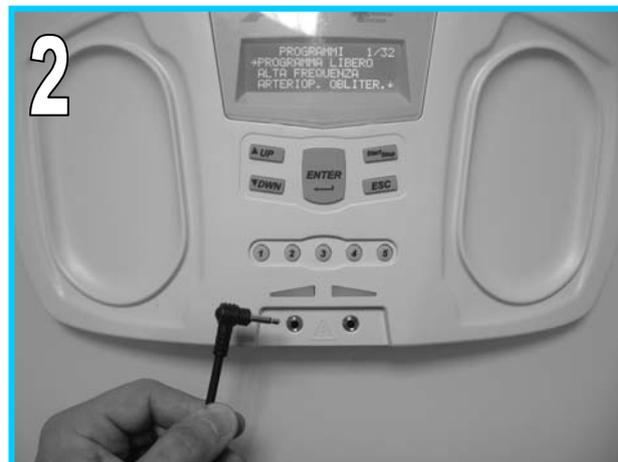


Collegare il cavetto proveniente dalla stuoia




Accendere il dispositivo tramite il tasto sul retro (portarlo in posizione 1)

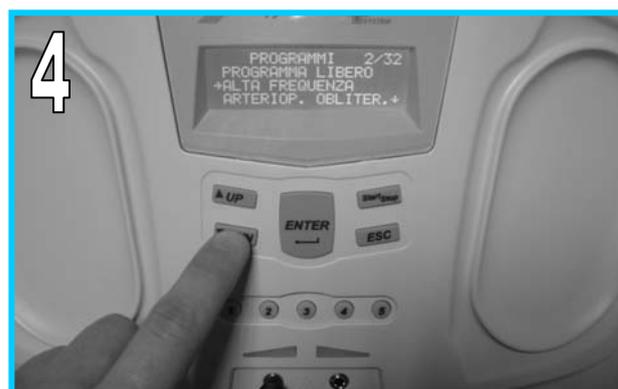

Selezionare il programma num.2 "alta frequenza" tramite i tasti "UP" e "DWN"

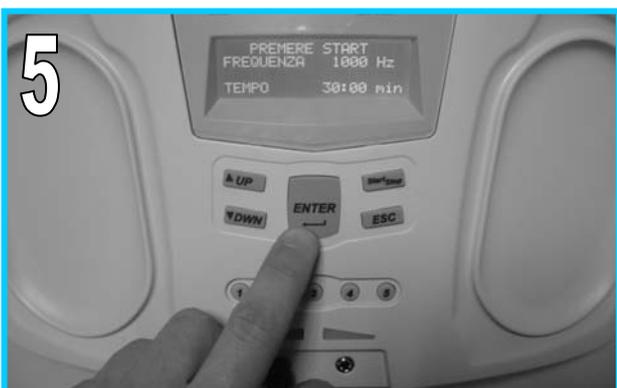

Confermare la scelta del programma 2 Con il tasto "ENTER"

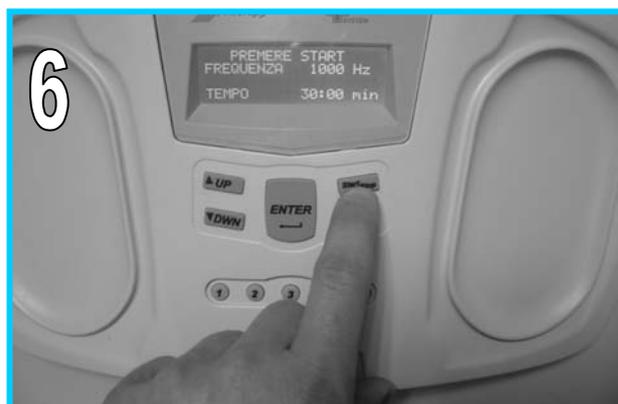

Avviare il trattamento tramite il tasto "START/STOP" Il trattamento continuerà fino ad una nuova pressione del tasto "START/STOP"